



WeGo

MANUAL DE
UTILIZARE



Cuprins

SECȚIUNEA 01: UTILIZARE PREVĂZUTĂ.....	3
SECȚIUNEA 02: DECLARAȚIE DE CONFORMITATE.....	4
SECȚIUNEA 03: AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII.....	5
SECȚIUNEA 04: TERMENII GARANȚIEI.....	7
SECȚIUNEA 05: INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ.....	7
SECȚIUNEA 06: PRECAUȚII ȘI CONTRAINDICAȚII.....	9
SECȚIUNEA 07: CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.....	10
SECȚIUNEA 08: SERVICII PENTRU PRODUS.....	11
SECȚIUNEA 09: LINIAMENTE IMPORTANTE.....	11
SECȚIUNEA 10: INSPECȚIA PRODUSULUI.....	12
SECȚIUNEA 11: REEMITEREA PRODUSELOR FIREFLY.....	12
SECȚIUNEA 12: ASAMBLAREA WEGO-ULUI DUMNEAVOASTRĂ.....	13
SECȚIUNEA 13: REGLAREA WEGO.....	19
SECȚIUNEA 14: UTILIZAREA SCAUNULUI GOTO CU WEGO.....	20
SECȚIUNEA 16: DIMENSIUNILE CĂRUCIORULUI WEGO.....	23
SECȚIUNEA 17: TABELUL CU SIMBOLURI.....	24



FABRICAT DE
IBELIEVE SPORTS LTD PENTRU JAMES
LECKEY DESIGN LTD

TEL: +44 (0)28 9260 0750
MODEL: CĂRUCIOAR WEGO

LUNA ȘI ANUL
FABRICAȚIEI: 2018/11

APLICAREA
STANDARDULUI: ISO 7176

**DENUMIRE COMERCIALĂ ÎNREGISTRATĂ
ȘI ADRESA**
JAMES LECKEY DESIGN LIMITED

19C BALLINDERRY ROAD, LISBURN BT28
2SA, REGATUL UNIT

TEL: +44 (0)28 9260 0750
MODEL: CĂRUCIOAR WEGO

LUNA ȘI ANUL
FABRICAȚIEI: 11/2018

APLICAREA
STANDARDULUI: ISO 7176



AVERTISMENT: Pentru a evita
răniri grave cauzate de cădere sau
alunecare, folosiți întotdeauna hamul
scaunului. Nu lăsați copilul
nesupravegheat.

IMPORTANT: Păstrați aceste instrucțiuni
pentru referințe viitoare. Siguranța
copilului este responsabilitatea
dumneavoastră. Acest cărucior este
potrivit pentru un singur copil.

AVERTISMENT: Acest scaun nu este
potrivit pentru copii cu vârsta sub 6 luni.

**CONFORM CU BS 1021 – PARTEA 1:
2014 REGLEMENTĂRI DE SIGURANȚĂ
PENTRU APRINDEREA DE LA ȚIGARETE**



**ATENȚIE: NEGLIJENȚA PROVOACĂ
INCENDII**

**Firefly WeGo este un cărucior ușor, complet pliabil, care permite
deplasarea facilă și desfășurarea activităților zilnice.**

SECȚIUNEA 01: UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Utilizare prevăzută

Căruciorul WeGo este conceput pentru a oferi mobilitate copiilor care nu pot merge independent, până la o greutate maximă de 30 kg. De asemenea, este adecvat pentru copiii care necesită suport suplimentar pentru partea superioară a corpului și nu pot sta în șezut fără ajutor.

Indicații de utilizare

WeGo este indicat atât pentru utilizare prescriptivă, cât și non-prescriptivă, pentru copiii care necesită niveluri ușoare de suport postural sau care au dificultăți de ambulație.

WeGo este în principal un dispozitiv non-prescriptiv, disponibil direct pentru părinți/îngrijitori. Utilizatorii pot include, dar nu se limitează la, copii non-ambulatori cu afecțiuni neuromusculare, congenitale sau cromozomiale, leziuni ale măduvei spinării sau întârziere globală în dezvoltare. Aceste condiții afectează, de regulă, capacitatea persoanei de a sta în șezut fără sprijin.

WeGo este conceput să fie compatibil cu GoTo Seat, un dispozitiv portabil de ședere produs de Leckey și proiectat pentru a oferi niveluri superioare de suport postural pe termen scurt copiilor cu dizabilități. Pentru copiii care necesită acest nivel mai ridicat de suport postural, se indică utilizarea adițională a scaunului GoTo împreună cu WeGo.

AVERTISMENT – Copilul trebuie securizat în hamul cu 5 puncte în permanență și nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat în cărucior.

AVERTISMENT – Atunci când WeGo este staționar, se recomandă ca frâna să fie complet acționată pentru a preveni orice mișcare nedorită.

WeGo este destinat utilizării pe termen scurt și nu va oferi suport postural adecvat pe termen lung pentru un copil cu nevoi suplimentare. Dispozitivul este indicat pentru a promova incluziunea în comunitate și pentru a facilita transportul de către îngrijitor.

Datorită naturii intime a îngrijirii personale asociate copiilor, acest produs este conceput astfel încât pielea și fluidele corporale, inclusiv urina și materiile fecale, pot intra în contact cu dispozitivul. Toate dispozitivele au fost proiectate având acest aspect în vedere, iar instrucțiunile de curățare sunt furnizate pentru a se asigura că sănătatea copilului sau adultului nu este compromisă.

SECȚIUNEA 02: DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

WeGo este clasificat ca Dispozitiv Medical Clasa I în conformitate cu reglementările UE și UK. James Leckey Design Ltd, în calitate de producător cu responsabilitate exclusivă, declară că Firefly WeGo este conform cu cerințele Directivei 93/42/EEC, ale Regulamentelor privind Dispozitivele Medicale 2017, ale Regulamentelor pentru Dispozitive Medicale UK 2002 și ale standardului EN 12182 – Aparate tehnice pentru persoane cu dizabilități și metode de testare.

Notificare pentru utilizator și/sau pacient:

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care se află utilizatorul și/sau pacientul.

NOTĂ:

Recomandări generale pentru utilizator.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la răniri fizice, deteriorarea produsului sau deteriorarea mediului!

SECȚIUNEA 03: AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII

AVERTISMENT – Risc de răsturnare:

- Nu lăsați niciodată WeGo pe teren denivelat.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat atunci când este așezat în WeGo, de exemplu în timp ce doarme.
- Verificați întotdeauna ca funcția de înclinare, cataramele de fixare ale scaunului GoTo și copertina să fie securizate înainte ca utilizatorul să fie transferat în cărucior. Asigurați hamul cu 5 puncte sau hamul cu 5 puncte al scaunului GoTo imediat ce utilizatorul este așezat în cărucior.
- Asigurați-vă că frâna este complet acționată și fixată (se aude un „click”).
- Evitați să atașați genți grele de mânerul căruciorului.
- Verificați ca partea superioară a căruciorului, unitatea scaunului sau dispozitivele de atașare ale scaunului auto să fie corect fixate înainte de utilizare.

AVERTISMENT – Risc de prindere a degetelor:

- Aveți grijă ca degetele operatorului sau ale copilului să nu fie prinse în spațiile dintre scaun și cadru.

AVERTISMENT – Siguranța ocupantului:

- WeGo nu este potrivit pentru copii sub 6 luni.
- Înainte de a așeza utilizatorul în WeGo, reglați produsul în poziția terapeutică și verificați stabilitatea acestuia, căruciorul fiind complet deschis și frâna de parcare complet acționată.
- Transferul utilizatorului în și din produs trebuie efectuat cu echipament și personal adecvat.
- Asigurați-vă că există suficient spațiu pentru acces înainte de a efectua transferul în dispozitiv și că toate clemele și cataramele sunt fixate (ex. cataramele pentru prinderea scaunului GoTo). Mutarea utilizatorului în timp ce este așezat sau efectuarea ajustărilor scaunului în timp ce utilizatorul este în scaun nu este recomandată.
- Asigurați-vă că toate hamurile cu 5 puncte sunt închise și ajustate corect pentru a menține utilizatorul în siguranță înainte de folosirea WeGo. Nu lăsați copilul nesupravegheat în WeGo. Există risc de strangulare sau sufocare dacă utilizatorul rămâne prins în anumite părți ale căruciorului.

- Dacă utilizatorul prezintă orice formă de disconfort sau suferință, scoateți-l din produs cât mai rapid și sigur posibil.
- Pentru a evita accidentările, asigurați-vă că copilul este la distanță în timpul plierii și deplierii produsului.
- Nu lăsați copilul să se joace cu acest produs.
- Acest produs nu este potrivit pentru alergare sau patinare.
- Nu folosiți niciodată acest cărucior pentru mai mult de un copil.

PRECAUȚIE – Risc de prindere a degetelor:

- Aveți grijă, la asamblare sau ajustarea poziției componentelor scaunului, ca degetele utilizatorului sau ale dumneavoastră să nu fie prinse în timpul poziționării componentelor sau strângerii elementelor de fixare.
- Îngrijitorul nu trebuie să atingă niciun îmbinare sau pivot aflat în mișcare sau neblocată.
- Fiți atenți în timpul asamblării, plierii, deplierii și ajustării înclinării spătarului, pentru a evita ciupirea degetelor.

PRECAUȚIE – Verificări zilnice:

- WeGo trebuie verificat zilnic înainte de utilizare pentru a vă asigura că toate hamurile, elementele scaunului și ale cadrului sunt fixate corect.
- Inspectați vizual produsul înainte de utilizare. Dacă aveți dubii, OPRIȚI-VĂ. Dacă suspectați sau știți că produsul sau o componentă este defectă, OPRIȚI-VĂ. Contactați departamentul de servicii clienți sau distribuitorul local cât mai curând posibil.

PRECAUȚIE – Curățare:

- Curățați produsul regulat pentru a preveni acumularea murdăriei. Murdăria acumulată poate uza prematur componentele textile și poate favoriza coroziunea produsului. Folosiți doar soluții de curățare neabrazive și lavete umede; nu utilizați jet de apă pe tapițerie cât timp este atașată produsului. Asigurați-vă întotdeauna că produsul este complet uscat înainte de utilizare. Consultați secțiunea Curățare & Îngrijire din manualul utilizatorului.

PRECAUȚIE – Jet de apă / furtunuri:

- Nu folosiți furtunuri sau aparate de spălat cu presiune pe componentele cadrului, deoarece cadrul nu este etanș și poate fi deteriorat prin infiltrarea apei.

PRECAUȚIE – Depozitare:

- Produsul trebuie ținut departe de toate sursele directe de căldură, inclusiv flăcări deschise, țigări, încălzitoare electrice sau pe gaz.

PRECAUȚIE – Eliminare:

• Eliminați WeGo doar într-un centru de colectare a deșeurilor, în categoria corectă de reciclare.

Acest produs este potrivit pentru un copil care nu poate sta singur în șezut, nu se poate rostogoli și nu se poate ridica sprijinindu-se în mâini și genunchi. Greutatea maximă a copilului: 30 kg.

SECȚIUNEA 04: TERMENII GARANȚIEI

Garanția pentru WeGo se aplică numai atunci când produsul este utilizat conform destinației sale, respectând toate specificațiile producătorului.

O garanție de un an este oferită pentru acest produs fabricat de James Leckey Design Ltd.

Produsele pot fi returnate pentru garanție, reparație sau înlocuire în termen de până la 12 luni de la primire. După ce ne contactați, vom organiza colectarea produsului pe cheltuiala noastră, iar după ce acesta ne este returnat, îl vom repara sau înlocui și îl vom trimite înapoi în termen de 14 zile.

În toate cazurile, este responsabilitatea clientului să se asigure că produsele returnate sunt ambalate corespunzător, de preferat în ambalajul original.

SECȚIUNEA 05: INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

1. Citiți întotdeauna complet instrucțiunile de utilizare înainte de folosire.
2. Asigurați-vă întotdeauna că evaluați WeGo pentru a stabili dacă este potrivit înainte de a așeza copilul în el.
3. Copiii nu trebuie lăsați niciodată nesupravegheați în acest produs.
4. Greutatea maximă a utilizatorului pentru WeGo este de 30 kg (66 lbs). Aceasta nu trebuie depășită niciodată.
5. Nu modificați WeGo și nu utilizați componente care nu sunt aprobate de Firefly. Acest lucru poate pune copilul în pericol și poate anula garanția.
6. WeGo nu a fost testat pentru impact și nu poate fi utilizat pentru transportul în vehicule motorizate.
7. Acest cărucior a fost proiectat pentru a transporta un singur copil. Nu transportați alte obiecte sau copii decât dacă este specificat în acest manual. Nerespectarea poate deteriora căruciorul și/sau îl poate face instabil.
8. Supraîncărcarea sau plierea incorectă poate deteriora căruciorul.
9. Dacă utilizați scaunul GoTo împreună cu WeGo, asigurați-vă întotdeauna că este fixat ferm de cărucior prin atașarea celor trei curele negre.

Consultați secțiunea 14 pentru instrucțiuni suplimentare.

10. Folosiți o atenție sporită când utilizați căruciorul cu copilul în poziție complet înclinată, deoarece poate crește riscul de răsturnare.
11. Ridicați întotdeauna roțile din față peste borduri sau trepte apăsând în jos pe mâner.

12. WeGo trebuie păstrat departe de orice surse directe de căldură, inclusiv flăcări deschise, țigări, radiatoare electrice sau pe gaz.
13. Acest cărucior nu este potrivit pentru alergare sau patinare.
14. Nu permiteți niciodată copiilor să plieze, să asambleze sau să dezasambleze căruciorul.
15. Nu permiteți niciodată ca acest cărucior să fie folosit ca jucărie sau ca un copil să transporte alt copil în el.
16. Dacă aveți îndoieli privind siguranța utilizării căruciorului sau dacă vreo componentă se defectează, opriți imediat utilizarea produsului și contactați Serviciul Clienți Firefly la hello@firefly.sunrisemedical.com

AVERTISMENT: Nerespectarea acestor instrucțiuni poate pune în pericol copilul sau utilizatorul.

AVERTISMENT: Țineți folia de plastic departe de copii pentru a evita riscul de sufocare.

- Pentru siguranță suplimentară, se recomandă ca cureaua de prindere / cureaua de încheietură să fie purtată în permanență pentru a preveni deplasarea necontrolată a căruciorului.
- Atunci când căruciorul este staționar, frâna trebuie apăsată ferm până când se aude un clic. Acest clic indică faptul că frâna este complet acționată.
- Asigurați-vă că deblocați frâna înainte de a porni. Bara roșie trebuie readusă în poziția inițială pentru a elibera blocarea.
- Nu lăsați copilul nesupravegheat în scaun.
- Verificați ca partea superioară a căruciorului, unitatea scaunului sau dispozitivele de atașare ale scaunului auto să fie fixate corect înainte de utilizare.
- Asigurați-vă că copilul este prins cu sistemul de centură în 5 puncte pentru a preveni căderea din scaun.
- Asigurați-vă că copilul nu se află în apropiere atunci când pliați sau depierți căruciorul, pentru a evita accidentările.

AVERTISMENT:

1. Țineți unitatea scaunului departe de orice sursă de flacără sau aprindere. Acest lucru previne deformarea sau deteriorarea materialelor plastice sau textile.
2. Asigurați-vă că greutatea copilului nu depășește limita maximă de 30 kg pentru a evita deteriorarea scaunului.
3. Nu permiteți copiilor să plieze, să asambleze sau să dezasambleze căruciorul.
4. Nu permiteți utilizarea căruciorului ca jucărie și nu permiteți copiilor să se plimbe unul pe altul.
5. Nu utilizați căruciorul pentru mai mult de un copil.
6. WeGo nu a fost testat pentru impact și nu poate fi utilizat pentru transport în vehicule motorizate.

7. Acest cărucior nu este potrivit pentru alergare sau patinare.
8. Țineți folia de plastic departe de copii pentru a evita sufocarea.
9. Supraîncărcarea sau plierea incorectă poate deteriora căruciorul.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate pune în pericol copilul sau utilizatorul.

SECȚIUNEA 06: PRECAUȚII ȘI CONTRAINDICAȚII

PRECAUȚII:

- Deformări spinale fixe, cum ar fi scolioza sau cifoza.
- Contracturi musculare severe.
- Asimetrie musculară sau scheletică severă, inclusiv luxație de șold.
- Afecțiuni progresive cu pierdere de masă musculară.
- Istoric recent sau risc ridicat de fracturi osoase.
- Risc ridicat de leziuni prin presiune sau răni deschise.
- Tipare de mișcare puternice, necontrolate.
- Activitate convulsivă slab controlată.
- Copii dependenți de utilizarea gastrostomiei endoscopice percutanate.
- Instabilitate medicală, inclusiv funcție respiratorie sau cardiovasculară compromisă.
- Dependență de aparate de susținere a vieții, cum ar fi butelii de oxigen.
- Deficiențe semnificative de învățare și/sau probleme comportamentale.

CONTRAINDICAȚII:

- Copilul are mai puțin de 6 luni.

Nu există alte contraindicații asociate utilizării WeGo.

Toate precauțiile și contraindicațiile trebuie evaluate la discreția clinicianului care prescrie sau a părinților. Leckey și Firefly recomandă ca un clinician instruit și experimentat să fie prezent la toate evaluările inițiale, configurările, setările și reinnoirile produsului pentru a minimiza riscul.

SECȚIUNEA 07: CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Căruciorul poate fi curățat cu apă rece (300 ml) și detergent blând.
2. Căptușeala este detașabilă și se poate spăla la mașina de spălat cu apă rece și detergent blând. Nu se recomandă uscarea la tambur.
3. Lăsați întotdeauna produsul să se usuce înainte de a-l plia și depozita.
4. Curățați cadrul cu o cârpă umedă și detergent blând.

5. Nu folosiți produse de curățare abrazive pe cărucior.

Sfat:

Unul dintre cele mai bune produse de curățare a tapițeriei pe bază de apă este foarte ușor de făcut acasă. Puneți o cană de apă caldă (nu fierbinte) într-un bol și adăugați 1/4 cană de săpun biodegradabil pentru vase. Bateți cu un mixer electric la viteză medie până când lichidul devine o spumă densă. Această spumă va îndepărta murdăria acumulată și majoritatea petelor de alimente sau băuturi. Pe lângă faptul că este simplu de preparat și ieftin, acest produs este și netoxic și prietenos cu mediul.

SECȚIUNEA 08: SERVICII PENTRU PRODUS

Pentru orice probleme legate de service, vă rugăm să consultați site-ul Firefly: www.fireflyfriends.com sau să contactați echipa de Servicii Clienți Firefly la: hello@firefly.sunrisemedical.com

SECȚIUNEA 09: LINIAMENTE IMPORTANTE

1. Aveți grijă să evitați rănirea degetelor la plierea și desperecherea cadrului.
2. Înainte de a așeza copilul în WeGo, asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt activate.
3. Securizați copilul în ham imediat ce acesta este așezat în cărucior.

Așezarea copilului în scaunul GoTo

1. Scaunul GoTo trebuie fixat sigur în poziția sa înainte de a așeza copilul în scaun.
2. Asigurați-vă că centurile hamului nu împiedică așezarea copilului în scaun. Centurile pentru umeri și centurile laterale de sprijin trebuie să fie foarte lejere.
3. Închideți catarama centrală și reglați centurile laterale de sprijin pentru a asigura securitatea copilului în ham. Lungimea centurii pentru umeri trebuie ajustată astfel încât copilul să fie bine fixat.
4. Lungimea centurii pentru zona inghinală poate fi ajustată accesând mecanismul de reglare sub husa căptușită. În GoTo mărimea 2, locația centurii inghinale poate fi mutată lateral pentru a oferi mai mult spațiu pe măsură ce copilul crește.

Scoaterea copilului din scaunul GoTo

1. Slăbiți centurile pentru umeri și centurile laterale de sprijin.
2. Delegați catarama centrală folosind butonul de eliberare al hamului.
3. Scoateți centurile de pe umerii copilului și apoi brațele copilului din ham cu grijă.
4. Odată ce picioarele copilului sunt scoase în siguranță, așezați brațele copilului prin centurile pentru umeri – acestea trebuie să fie foarte lejere. Asigurați-vă că pernuțele centurilor pentru umeri sunt pe umerii copilului.

SECȚIUNEA 10: INSPECȚIA PRODUSULUI

Recomandăm verificarea echipamentului înainte de fiecare utilizare pentru a asigura siguranța produsului.

1. Verificați tapițeria pentru semne de uzură.
2. Verificați ca toate cataramele să funcționeze corect.
3. Verificați ca toate elementele de pliere să fie sigure și să funcționeze corect înainte de utilizare.
4. Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt activate înainte de utilizare.
5. Verificați frânele pentru a vă asigura că funcționează complet.
6. Nu utilizați căruciorul dacă vreo parte este deteriorată sau lipsă.

SECȚIUNEA 11: REEMITEREA PRODUSELOR FIREFLY

Înainte de reemiterea unui produs, se recomandă ca acesta să fie dezinfectat folosind una dintre următoarele proceduri:

Notă: Curățați întotdeauna produsul mai întâi pentru a îndepărta murdăria acumulată înainte de dezinfectare/igienizare.

1. Ori de câte ori este posibil, recomandăm utilizarea unui sistem automatizat de dezinfectare tip „fogger”, care acoperă complet suprafețele produsului cu un agent dezinfectant. Instrucțiunile producătorului pentru sistemul ales trebuie respectate cu strictețe înainte de utilizare.
2. Dacă un sistem automatizat de dezinfectare nu este disponibil, toate suprafețele produsului trebuie șterse cu șervețele dezinfectante sau cu dezinfectant lichid aplicat pe o cârpă moale. Produse adecvate includ: 70% IPA, 70% alcool sau soluție de înălbitor diluată. Instrucțiunile producătorului pentru produsul ales trebuie respectate. Tapițeria și țesăturile produsului trebuie curățate temeinic conform secțiunii Curățare și Întreținere din acest manual.

Asigurați-vă că o copie a manualului de utilizare este furnizată împreună cu produsul. Dacă aveți dubii privind utilizarea în continuare în siguranță a produsului Firefly by Leckey sau dacă orice componentă se defectează, opriți imediat utilizarea produsului și contactați echipa noastră de Servicii Clienți Firefly cât mai curând posibil la: hello@firefly.sunrisemedical.com


SECȚIUNEA 12: ASAMBLAREA WEGO-ULUI DUMNEAVOASTRĂ

1. Deschideți cadrul WeGo ridicând mânerul și sprijinindu-vă cu piciorul pe tubul axului din spate, așa cum este indicat. **A**
2. Ridicați mânerul **B** până auziți un „clic”, ceea ce indică faptul că cadrul este blocat în poziția deschisă. **C**
3. Asigurați-vă că ambele blocaje de siguranță sunt activate.
4. Pentru a plia WeGo, ridicați manetele de blocare de pe ambele părți. **D**



12.1 – ASAMBLAREA ROȚII DIN SPATE

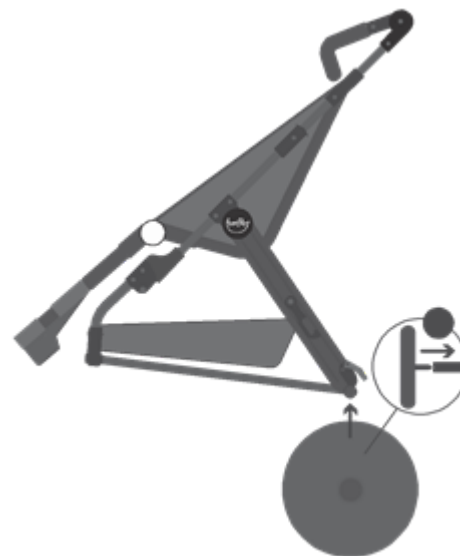1. Ridicați tubul axului din spate al căruciorului și introduceți axul roții din spate până auziți un „clic”, ceea ce indică faptul că roata este blocată în poziție. Repetați pentru a doua roată.
2. Asigurați-vă că roțile sunt montate corect înainte de a folosi WeGo. Pentru verificare, trageți de roată pentru a vă asigura că este blocată în poziție.



12.2 – ASAMBLAREA ROȚII DIN FAȚĂ

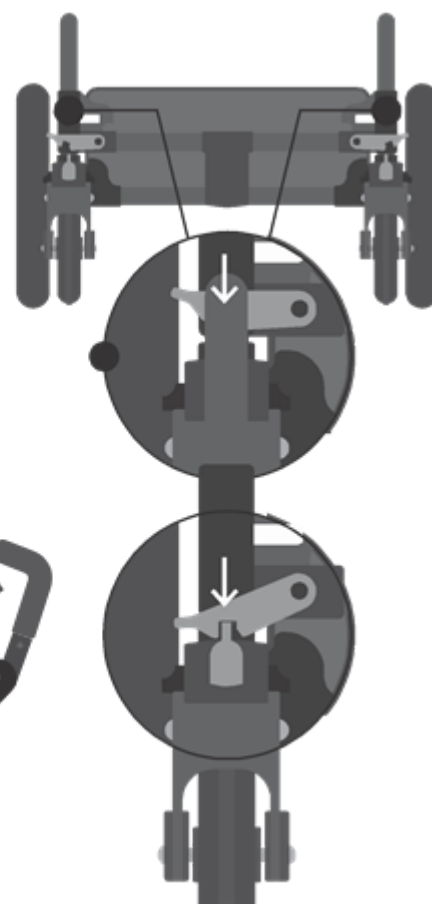
1. Ridicați tubul axului din față al căruciorului și introduceți axul roții din față până auziți un „clic”, ceea ce indică faptul că roata este blocată în poziție. Repetați pentru a doua roată. **A**

2. Asigurați-vă că roțile sunt montate corect înainte de a folosi WeGo. Pentru verificare, trageți de roată pentru a vă asigura că este blocată în poziție.

3. Pentru a bloca roțile din față în poziție, aliniați-le în poziție drept înainte și glisați ghidajul de blocare a roții din față în jos. **A**

4. Pentru a debloca roțile din față, glisați ghidajul de blocare în sus.

5. Veți auzi un „clic” audibil care indică faptul că frâna este complet activată.



12.3 – REGLAREA MÂNERULUI

1. Pentru a regla mânerul, apăsați butoanele negre situate pe partea interioară a ansamblului mânerului și ajustați mânerul la poziția dorită. **A**



12.4 – UTILIZAREA FRÂNEI

1. Pentru a activa frâna, apăsați cu piciorul bara roșie a frânei până când roțile se blochează. Veți auzi un „clic”

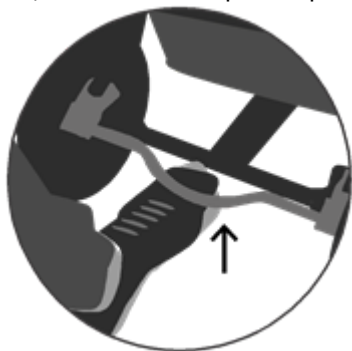
12.5 – FIXAREA COPERTINEI

1. Atașați cârligul din plastic la cărucior, glisându-l în locul de prindere indicat. **A**


audibil care indică faptul că frâna este complet activată.



2. Pentru a elibera frâna, trageți bara roșie a frânei înapoi în poziția inițială.



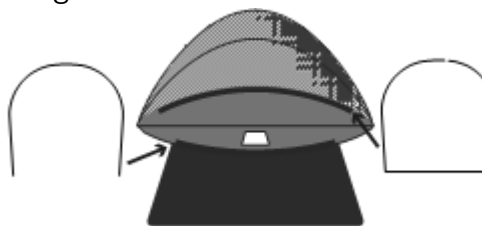
2. Introduceți tijețele din plastic prin materialul copertinei, așa cum este arătat în imagine.



3. Introduceți tijețele în cârligele din plastic de pe ambele părți ale căruciorului și apăsați-le în jos. **B**

4. Prindeți elasticul negru în jurul cârligelor de pe spatele cadrului căruciorului.

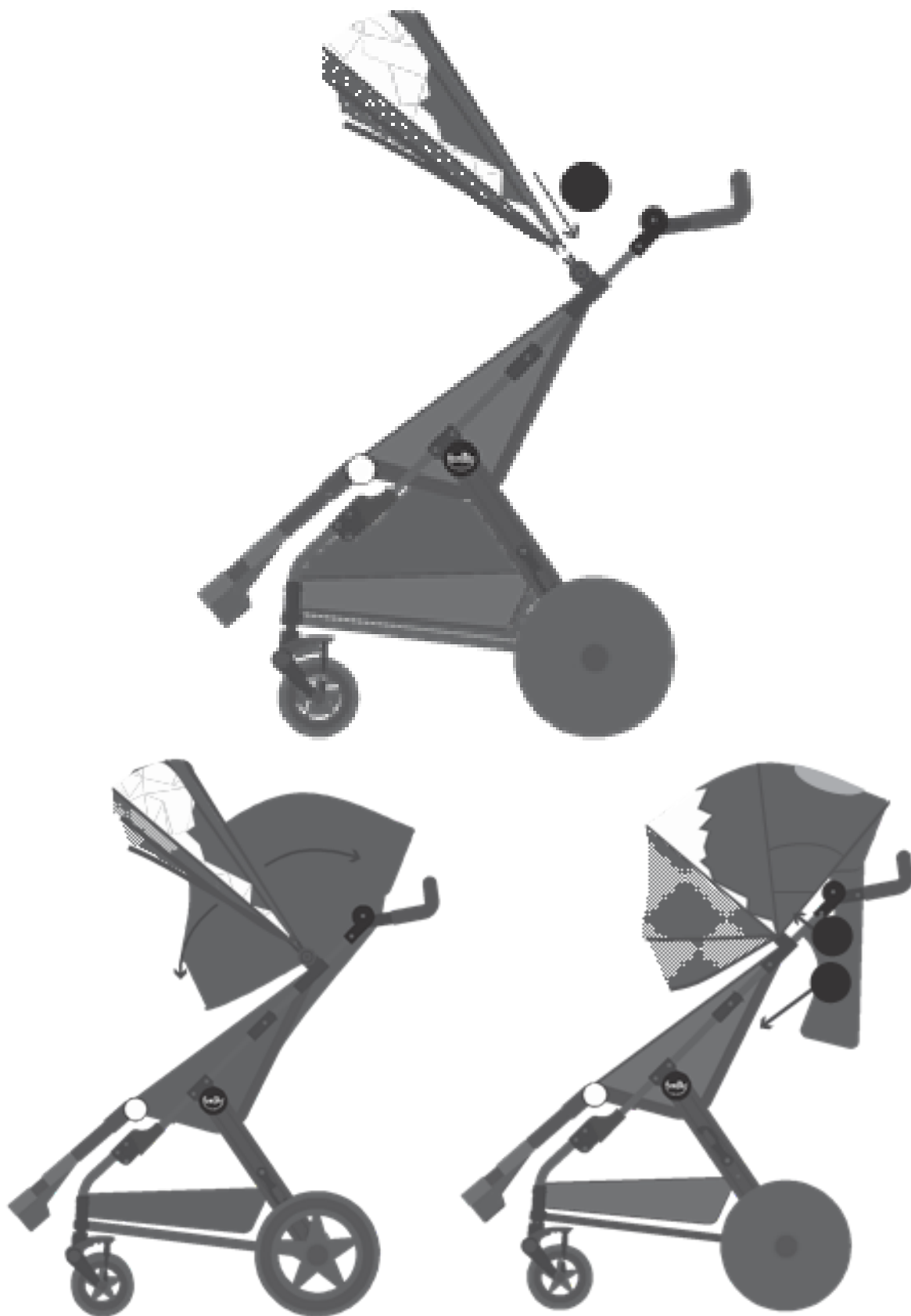5. Conectați velcro-ul de pe copertină pentru a vă asigura că aceasta este fixată corespunzător. **C**



12.6 – FIXAREA HUSEI DE PLOAIE

Sfat util: Pentru a pune spătarul în poziția complet verticală, trageți-l înainte și strângeți cât mai mult posibil înainte de a atașa copertina.

1. Începeți cu suportul pentru picioare: trageți husa de ploaie peste cărucior și peste copertină, apoi lăsați-o să coboare pe spatele WeGo.
2. Lăsați „aripile” husei să coboare pe părți și fixați-le în interiorul cadrului. **A**
3. Prindeți elasticul negru în jurul cârligelor de pe spatele cadrului căruciorului. **B**

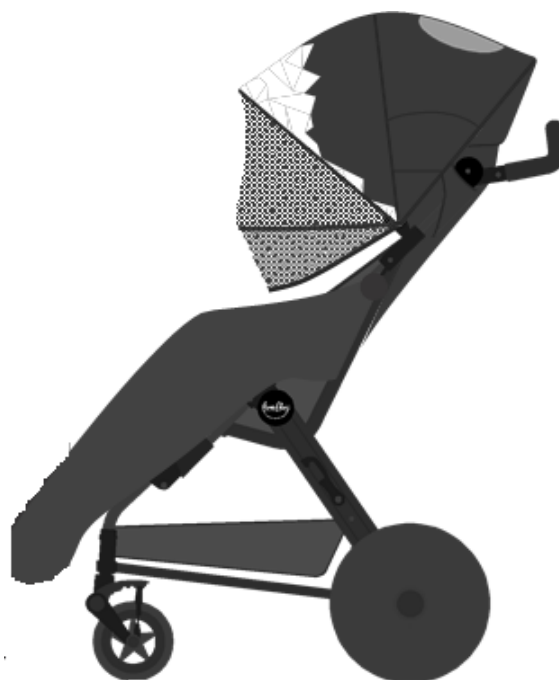


12.7 – FIXAREA SACULUI PENTRU PICIOARE

1. Trageți sacul pentru picioare peste suportul pentru picioare și treceți clemele prin buclele de pe ambele părți ale căruciorului.

Atenție: Copiii nu trebuie lăsați niciodată nesupravegheați în acest produs.

Asigurați-vă că toate componentele de reglare ale sacului pentru picioare sunt păstrate departe de copil.



12.8 – FIXAREA PLASEI DE ȚÂNTĂRI

12.9 – FIXAREA SUPTULUI PENTRU PAHARE

1. Plasa de țânțari se așază peste cărucior și se fixează folosind clemele – treceți clemele prin buclele de pe ambele părți ale căruciorului.

Atenție: Folosiți doar băuturi reci în suportul pentru pahare.

Glisați suportul pentru pahare în prinderea de pe partea dreaptă a cadrului căruciorului.





SECȚIUNEA 13: REGLAREA WEGO

13.1 – REGLAREA SPĂTARULUI

1. Pentru a înclina spătarul pe spate, trageți levierul gri din plastic spre dvs. până la unghiul dorit. **A**

2. Pentru a aduce spătarul în poziție verticală, trageți inelele D gri din plastic până la unghiul dorit. **B**

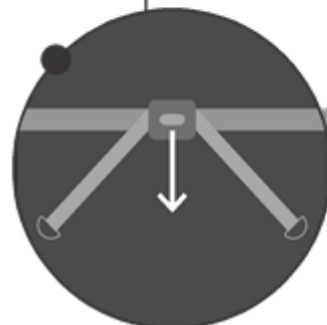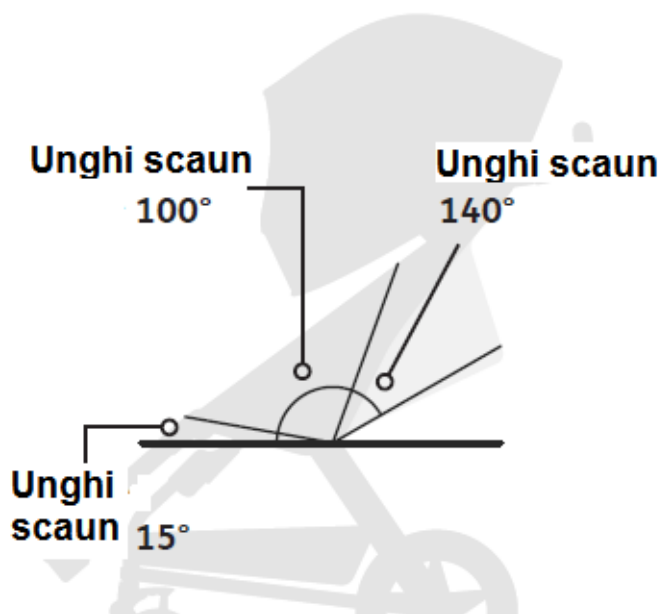3. Pentru a fixa scaunul în poziție complet verticală, împingeți spătarul în sus peste cadru și strângeți prin tragerea inelelor D din plastic.




ATENȚIE: Nu încercați niciodată să reglați WeGo atunci când copilul se află în scaun.

13.2 – REGLAREA SUPORTULUI PENTRU PICIOARE

1. Pentru a fixa suportul pentru picioare la cea mai scurtă poziție, împingeți-l în sus cât de mult permite și fixați capsele superioare

2. Pentru a fixa suportul pentru picioare la cea mai lungă poziție, eliberați capsele și trageți suportul în jos până când știftul de blocare face „clic”, apoi fixați capsele inferioare pe fiecare parte.

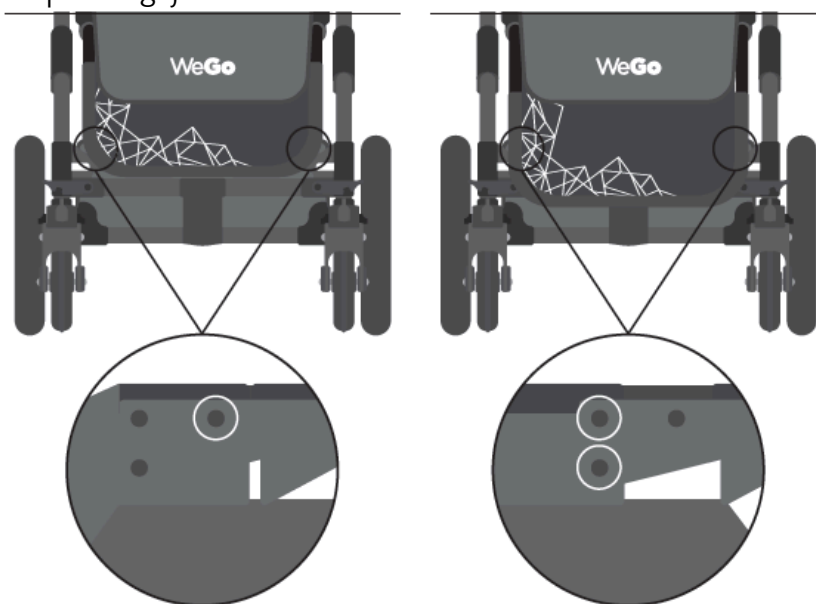pe fiecare parte a țesăturii. Asigurați-vă că acestea sunt complet angajate.




3. Placa pentru picioare poate fi înclinată la unghiul dorit prin apăsarea butonului alb de pe balamaua laterală a plăcii.




SECȚIUNEA 14: UTILIZAREA SCAUNULUI GOTO CU WEGO

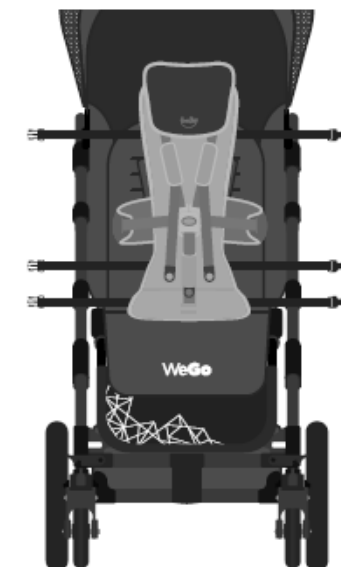1. Asigurați-vă că toate centurile de pe scaunul GoTo sunt lejere și nu sunt cuplate între ele. Așezați scaunul GoTo în cărucior.



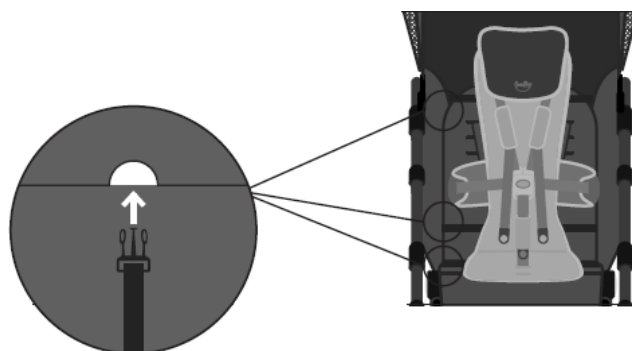
2. Treceți chingile prin fantele indicate și fixați-le pe ambele părți.



3. Trageți chingile spre exterior pentru a le strânge. A

4. Aranjați chingile în exces sub formă de bucle și fixați-le în cleme. B

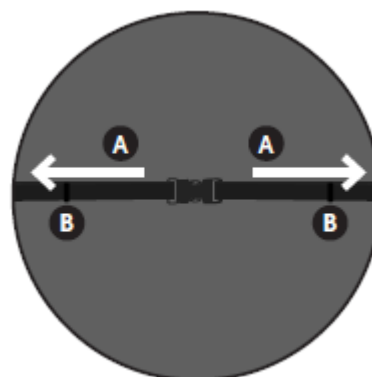5. Asigurați-vă că toate chingile negre sunt fixate bine în jurul căruciorului și că catarama cu cinci puncte din față este desfăcută înainte de a așeza copilul în scaunul GoTo.




SECȚIUNEA 14.1: DESCHIDEREA ȘI ÎNCHIDEREA CATARAMEI CU CINCI PUNCTE

Înainte de a începe, asigurați-vă că chingile pentru umeri, suportul lateral și chingile pentru zona inghinală sunt desfăcute și libere.


Atașați cele două încuietori ale suportului lateral pe părțile cataramei centrale. A

Odată fixate, reglați chingile pentru umeri, chingile suportului lateral și chinga pentru zona inghinală prin tragerea chingilor pentru strângere. B

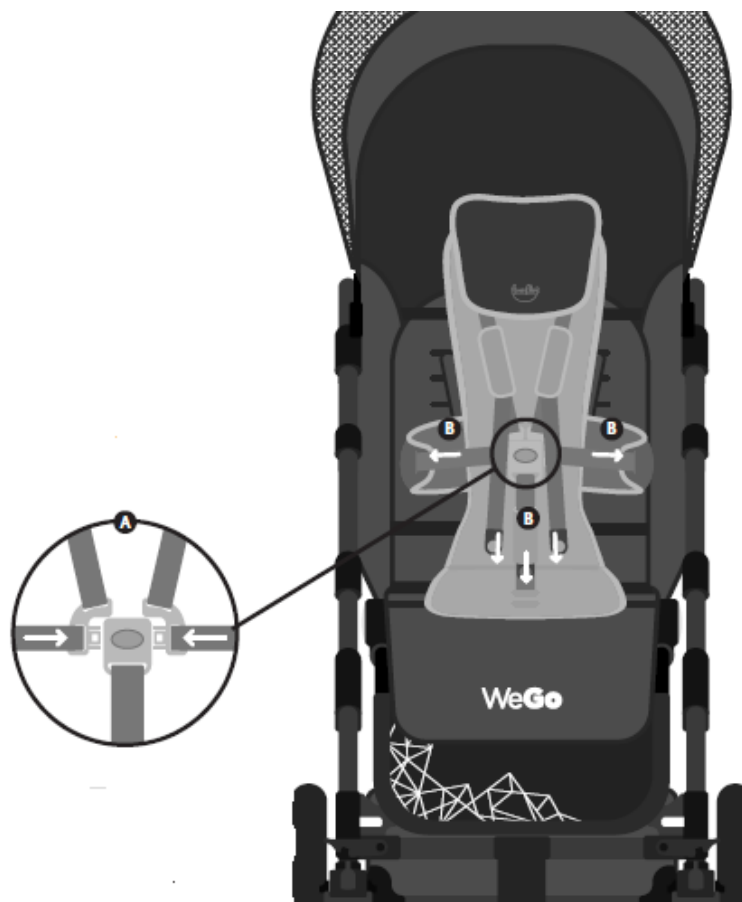ATENȚIE - Asigurați-vă că chingile nu sunt răsucite atunci când catarama este închisă.



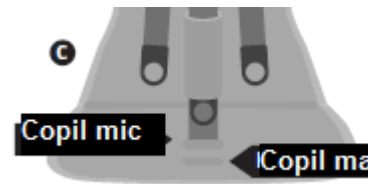
În scaunul GoTo mărimea 2, locația de montare a chingii pentru zona inghinală poate fi mutată înainte sau înapoi, în funcție de nevoile copilului. Asigurați-vă că este fixată bine pe baza din plastic a scaunului GoTo. **C**



SECȚIUNEA 14.2: REGLAREA TETIEREI ȘI SUPORTULUI LATERAL

Desfaceți butonul tetierei în sens invers acelor de ceasornic pentru a scoate tetiera de pe baza scaunului GoTo. Mutați tetiera în sus sau în jos pentru a obține poziția dorită. **A** Odată ce tetiera este la înălțimea dorită, înșurubați din nou butonul în baza scaunului GoTo, întorcându-l în sensul acelor de ceasornic. **B**

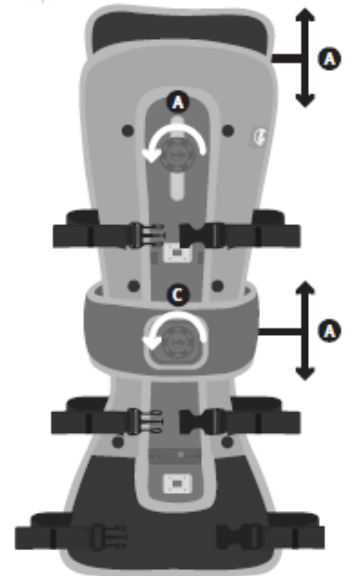Deconectați suportul lateral prin rotirea butonului în sens invers acelor de ceasornic. Mutați suportul lateral în sus sau în jos pentru a obține poziția dorită. Odată ce suportul lateral este la înălțimea dorită, fixați-l din nou prin rotirea butonului în sensul acelor de ceasornic. **C**




SECȚIUNEA 15: HAMUL WEGO

Pentru a regla chingile pentru umeri ale scaunului WeGo, treceți catarama de la capătul spătarului prin fanta din spate. **A**

Apoi, introduceți catarama prin fanta corespunzătoare înălțimii dorite. **B**

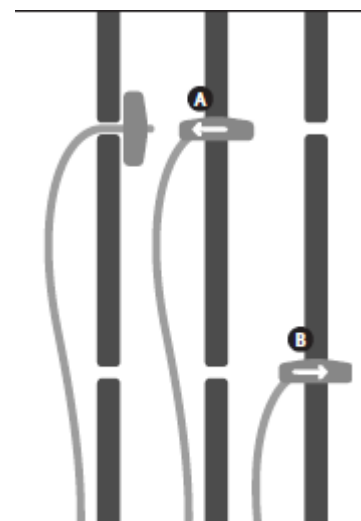Puteți strânge sau slăbi chingile prin reglarea cataramelor de pe chingi.

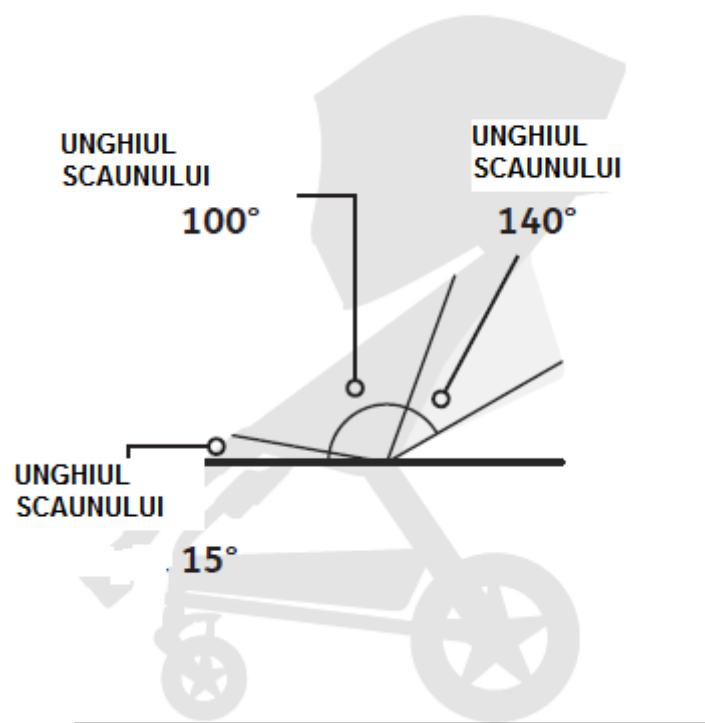









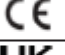





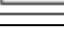
SECȚIUNEA 16: DIMENSIUNILE CĂRUCIORULUI WEGO

Lungimea la sol (plisat)	116cm
Înălțimea la sol (plisat)	38cm
Înălțimea WeGo	122cm
Adâncimea șezutului	26cm
Înălțimea șezutului	50cm
Lățimea șezutului	35cm
Lungimea minimă a suportului pentru picioare	25cm
Lungimea maximă a suportului pentru picioare	33cm
Greutatea WeGo	11kg
Greutatea WeGo cu scaunul GoTo	13kg

Vă rugăm să rețineți – Nu toți copiii care folosesc scaunul GoTo, mărimea 2, vor fi potriviți pentru WeGo. Vă rugăm să consultați ghidul nostru de măsurători.




SECȚIUNEA 17: TABELUL CU SIMBOLURI

Simbol	Semnificație
	Producător
	Greutate maximă admisă
	Număr de serie
	Cod produs
	Citiți instrucțiunile de utilizare
	Marcaj CE
	Marcaj UKCA
	Dispozitiv medical
	Avertisment
	Data fabricației
	Fără latex
	Identificare unică a dispozitivului



Fireflyfriends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland

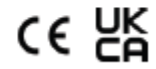T: (+44) 28 9267 8879
E: hello@firefly.sunrisemedical.com



firefly.sunrisemedical.com



Date of Preparation : FEB2025

LS621-04