



SCAUN DE POZIȚIONARE
JORDI™



MANUALUL UTILIZATORULUI

-----□-----
Producătorul își asumă responsabilitatea pentru utilizarea corectă a dispozitivului
numai atunci când produsul
a fost achiziționat de la un angajat calificat **al Akces-MED Ltd.** sau de la un
magazin medical specializat!

Akces-MED Ltd. își rezervă dreptul de a introduce modificări tehnice și comerciale
în conținutul instrucțiunii fără avertisment.



Produsul marcat cu semnul CE este un dispozitiv medical din clasa I, conform regulii
1, în concordanță cu
cerințele Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului
din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale.



Compania Akces-MED Ltd. a introdus sistemul de management al calității ISO
13485 privind
producție, vânzări și servicii. Sistemul este certificat de Det Norske Veritas.



Cuprins

INTRODUCERE	5
1. SCOPUL MANUALULUI DE UTILIZARE	5
2. INDICAȚII ȘI CONTRAINDICAȚII PENTRU UTILIZARE	6
3. CARACTERISTICA GENERALĂ A SCAUNULUI.....	8
4. TABEL DE MĂRIMI	9
5. REGLAREA SCAUNULUI	9
5.1 MONTAREA SCAUNULUI.....	11
5.2 SPĂTARUL.....	13
5.3 SUPORTURI PENTRU BRAȚE (COTIERE).....	13
5.3.1 ÎNĂLȚIMEA COTIERELOR.....	14
5.3.2 UNGHIUL DE INCLINARE AL COTIERELOR.....	14
5.4 SCAUNUL.....	15
5.4.1 REGLAREA ADÂNCIMII SCAUNULUI	15
5.4.2 REGLAREA ÎNĂLȚIMII SCAUNULUI.....	15
5.4.3 FUNCȚIA ÎNCLINARE ÎN SPAȚIU (TILT-IN-SPACE)	16
7. UTILIZAREA SCAUNULUI	17
7.1 PREGATIREA UTILIZATORULUI	17
7.2 UTILIZAREA SCAUNULUI	17
7.3 CUM SE UTILIZEAZĂ VESTA	18
8. NORME DE SIGURANȚĂ	21
9. TERMENI DE GARANȚIE.....	23
10. ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE	24
INSPECȚIA TEHNICĂ.....	26
11. ETICHETARE.....	29
11.1 SIMBOLURI.....	29

11.2 PLACĂ DE IDENTIFICARE/PROBĂ.....	30
---------------------------------------	----

INTRODUCERE

JORDI™ este un scaun de terapie școlară, care funcționează excelent pentru terapie și distracție, precum și pentru alte activități zilnice, cum ar fi învățarea sau mesele. La domiciliu, grădiniță, școală sau într-un grup de colegi, **JORDI™** va fi un instrument de ajutor de neînlocuit în procesul de reabilitare, atât în ceea ce privește mișcarea, cât și integrarea socială.

Designul durabil și reglarea funcției de înclinare în spațiu sunt principalele avantaje ale scaunului, care este apreciat în special de terapeuți. În plus, scaunul are reglarea înălțimii, lățimii și adâncimii. Deja în standard devine instrumentul ideal în procesul de reabilitare și o listă lungă de accesorii ne va permite să potrivim produsul nevoilor individuale.

Un alt avantaj este tapițeria medicală, ușor de curățat și dezinfectat.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual. Veți găsi informații despre produsul nostru

și veți învăța cum să-l utilizați în condiții de siguranță și în mod eficient.

Dacă aveți întrebări sau observații, nu ezitați să ne contactați:

Consultant în domeniul medical: mobil +48 516 183 883

Akces-MED Ltd: tel. +48 17 864 04 77

e-mail: export@akces-med.com

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru.

ATENȚIE

Înainte de a utiliza produsul, utilizatorul este obligat să se familiarizeze cu manualul de utilizare.

Amintiți-vă că respectarea liniilor directoare este foarte importantă. Asigurați siguranța și extindeți durabilitatea, precum și estetica dispozitivului.

1. SCOPUL MANUALULUI DE UTILIZARE

ATENȚIE

Manualul de instrucțiuni conține informații de bază necesare pentru pregătirea corectă a scaunului înainte de utilizare, utilizarea scaunului, întreținerea și curățarea scaunului.

Acest manual de utilizare trebuie păstrat într-un loc ușor accesibil. Manualul este destinat persoanelor care au grijă de utilizatorii cu handicap, precum și medicilor și

fizioterapeuților care se ocupă de scaun.

Înainte de a utiliza scaunul pentru prima dată, utilizatorul (sau îngrijitorul) este obligat să se familiarizeze cu manualul de utilizare.

2. INDICAȚII ȘI CONTRAINDICAȚII PENTRU UTILIZARE

Aceste dispozitive medicale sunt destinate persoanelor cu boli ortopedice, neurologice și cardiologice și persoanelor după operație, cu disfuncții musculo-scheletice, care nu au dobândit capacitatea de a sta independent sau care au dificultăți în adoptarea și menținerea poziției așezate.

Atât pentru persoanele flasce cu tonus muscular redus, cât și pentru persoanele cu spasticitate. Dispozitivul poate fi, de asemenea, foarte util pentru persoanele care necesită ameliorarea pe termen lung a unuiu sau a ambelor membre inferioare. Este un ajutor de neînlocuit în procesul de reabilitare, atât în ceea ce privește mișcarea, cât și integrarea socială. Dispozitivul este de mare ajutor în timpul activităților de zi cu zi, cum ar fi reabilitarea, dar și în timpul jocului, studierii sau mesei. Alegerea dimensiunii adecvate a dispozitivului depinde de indicațiile medicale și de parametrii anatomici, indiferent de vârsta utilizatorului.

Dispozitivul este recomandat persoanelor în următoarele cazuri:

- paralizie cerebrală – diferite tipuri și forme;
- leziuni cerebrale și ale măduvei spinării cu paralizie și slăbiciune a membrelor inferioare, tulburări de echilibru și coordonare motorie cu etiologie diferită;
- Boala demielinizantă (de exemplu, scleroza multiplă - SM),
- Meningocele,
- Boli musculare cu slăbiciune și paralizie (distrofie, miastenia gravis, miozită),
- Tulburări genetice,
- Degenerarea și bolile neurologice,
- După leziuni ale capului și măduvei spinării și traume ale coloanei vertebrale cu paralizie și pareză,
- Alte afecțiuni legate de slăbiciune musculară, paralizie și afecțiuni musculo-scheletice.

Contraindicații pentru ședere:

- starea critică a utilizatorului,
- paralizie;
- Sedare profundă,
- fracturi instabile cu recomandări ortopedice specifice, inclusiv fracturi ale coloanei vertebrale;
- Tromboză venoasă profundă netratată,

- Instabilitatea hemodinamică,
- Identificat disfuncția creierului atunci când stau în poziție verticală,
- Artrita severă a coloanei vertebrale cervicale,
- embolie pulmonară,
- Infarct miocardic recent în ultimele 24 de ore
- răni postoperatorii proaspete sau răni care nu se vindecă în zona spatelui, în zona centurii pelviene, în articulațiile șoldului și în coapse;
- Utilizatorii cu tulburări mintale nu ar trebui să fie lăsați în dispozitiv fără supravegherea unui îngrijitor.

3. CARACTERISTICA GENERALĂ A SCAUNULUI

SPATAR CU
INCLINARE
REGLABILA

MANARE CU
INALTIME SI
INCLINARE
REGABILE

CENTURA
PELVIANA

TAPITERIE
MEDICALA -
MEDICUS*

SCAUN CU
ADANCIME
REGLABILA


CADRU CU
INALTIME
REGLABILA



Accesoriile dedicate produsului JORDI™ sunt disponibile la adresa www.en.akces-med.com/product/jordi/ sau prin scanarea codului QR.



4. TABEL DE MĂRIMI

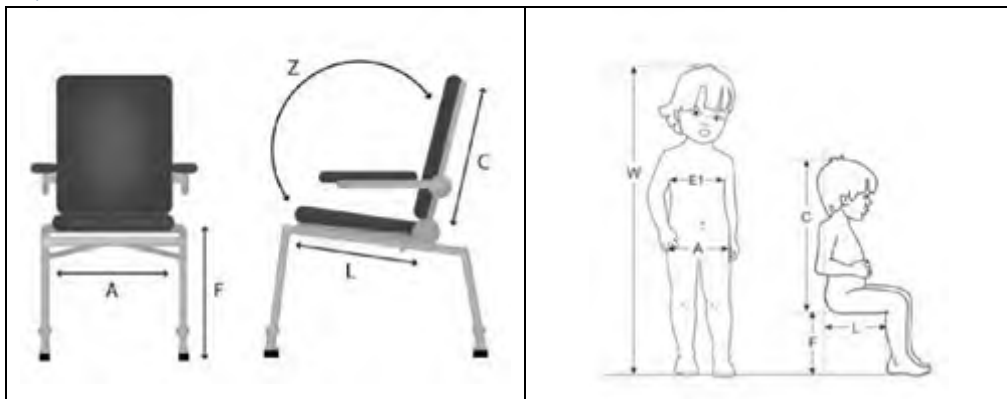

Simb	Măsurare	Unitat	Dimen	Dimens	Dimens	Dimen
W	înălțimea orientativă a	[cm]	90 -	100 -	110 -	150 -
A	lățimea scaunului și a spătarului	[cm]	25	30	37	45
	lățimea scaunului și a spătarului între suporturi (accesorii)	[cm]	12 - 22	15 - 26	22 - 33	30 - 42
L	adâncimea scaunului	[cm]	23 -	26 - 34	30 - 40	35 - 45
C	înălțimea spătarului	[cm]	33	39	46	55
	înălțimea tetierei (accesorii)	[cm]	37 -	43 - 59	50 - 66	59 - 75
F	înălțimea de la podea la scaun	[cm]	26 -	31 - 39	37 - 49	42 - 56
Z	unghiul de înclinare a spătarului	[°]	90 -	90 - 135	90 - 135	90 -
	greutatea maximă a	[kg]	50	65	80	120

Notă: Intervalul de toleranță la măsurare este de +/- 1 cm / 1/2 in.

*Această măsurătoare nu poate fi parametrul principal atunci când alegeți dimensiunea produsului.

Greutate și	Unit	Dimens	Dimens	Dimens	Dim
lățime	[cm]	37	42	52	64
lungime	[cm]	48	54	60	68
înălțime	[cm]	56	68	80	92
greutate	[kg]	6.5	8	10	12

Notă: Intervalul de toleranță la măsurare este de +/- 1 cm / 1/2 in.

Notă: Valori aproximative, în funcție de configurația produsului.

5. REGLAREA SCAUNULUI

SIMBOLURI



Pictograma „Informații” – apare în manual atunci când trebuie să citiți informațiile suplimentare.



Pictograma Info – apare în manual atunci când trebuie să utilizați instrumentele indicate în descrierea ansamblului.



Pictograma de avertizare – apare în manual atunci când trebuie să luați măsuri de precauție speciale

5.1 MONTAREA SCAUNULUI



Montați centura pelviană înainte de a asambla scaunul (Fig. 1 – 7)







5.2 SPĂTARUL




ATENȚIE

Strângeți ferm toate șuruburile după fiecare reglare.

5.3 SUPORTURI PENTRU BRAȚE (COTIERE)

5.3.1 ÎNĂLȚIMEA COTIERELOR

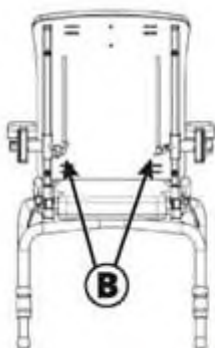

ATENȚIE

Strângeți ferm toate șuruburile după fiecare reglare.

5.3.2 UNGHIIUL DE INCLINARE AL COTIERELOR



ATENȚIE

Strângeți ferm toate șuruburile după fiecare reglare.

Înainte de a aplica tava, cotierele trebuie așezate la aceeași înălțime, paralel cu solul.

5.4 SCAUNUL

5.4.1 REGLAREA ADÂNCIMII SCAUNULUI

 25	 26
 27	Pentru a regla adâncimea scaunului, slăbiți montajul situat sub scaun, setați adâncimea dorită și apoi strângeți butoanele. Extinderea maximă a scaunului este indicată prin prinderea în găurile scaunului țevelor de pe ambele părți. Pentru a reduce adâncimea scaunului după atingerea extensiei maxime, trebuie să apăsați zăvorul/încuietoarea cu degetul spre interiorul țevei.

5.4.2 REGLAREA ÎNĂLȚIMII SCAUNULUI





5.4.3 FUNCȚIA ÎNCLINARE ÎN SPAȚIU (TILT-IN-SPACE)

i Datorită reglării corespunzătoare a înălțimii suporturilor pentru picioare, putem realiza o funcție de înclinare în spațiu a scaunului (fig. 32).



ATENȚIE

Există riscul ca scaunul să se poată înclina în spate, ceea ce crește din cauza setărilor extreme ale echipamentului (înclinarea/devalorizarea maximă a spătarului, funcția de înclinare maximă în spațiu, utilizarea roții). În cazul copiilor hiperactivi sau cu tendința de a se înclina înapoi, se recomandă utilizarea unui suport pentru picioare și luarea unei precauții suplimentare.

7. UTILIZAREA SCAUNULUI

Scaunul JORDI™ trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile incluse în acest manual de utilizare. Amintiți-vă să utilizați produsul numai cu cineva care este instruit și informat.

Nu uitați să pregătiți atât produsul, cât și utilizatorul înainte de a utiliza scaunul.

7.1 PREGATIREA UTILIZATORULUI

Înainte de a utiliza produsul, este esențial să vă asigurați că:

- Ținuta utilizatorului este ușoară și sunt recomandate haine sportive confortabile,
- Pantofii ar trebui să fie confortabili și, în plus, ar trebui să stabilizeze glezna
- din motive de igienă și pentru a evita abraziunea este recomandabil ca utilizatorul să poarte întotdeauna haine atunci când utilizează dispozitivul, pielea nu trebuie să fie dezgolită mai ales în locurile de contact regulat cu tapițeria
- Dacă sunt aplicate, canalele de scurgere, pungile, cateterele etc. trebuie asigurate pentru a funcționa corect și pentru a nu deranja în timpul utilizării produsului.
- dacă este necesar ca un utilizator să poarte provizii ortopedice (guler, corset, orteză, pantofi) dacă este recomandat de medic.

ATENȚIE

Îmbrăcămintea ar trebui să protejeze pielea pacientului de contactul direct cu tapițeria, precum și cu alte părți ale echipamentului.

Numai medicul poate lua o decizie cu privire la utilizarea oricărui tip de aprovizionare ortopedică!

7.2 UTILIZAREA SCAUNULUI

1. Cum să pregătiți scaunul pentru utilizare:

- desfaceți dispozitivul
- așezați dispozitivul pe sol uniform,
- să se asigure că toate piesele sunt în stare de funcționare, montate corect și stabile;
- blocarea roților (în cazul în care sunt montate baze mobile cu roți);
- ajustează dispozitivul la măsurătorile utilizatorului,

- să desfaceți vesta, curelele portbagajului etc., astfel încât să plasați cu ușurință dispozitivul pacientului;
- să plaseze utilizatorul în dispozitiv;
- să fixeze elementele utilizate pentru stabilizarea utilizatorului – centura sau vesta pelviană;
- montați echipamentul suplimentar.

2. În cazul utilizatorilor care au probleme cu vezica urinară, este necesar să se pună o bavetă specială pe scaun. Această bavetă poate fi achiziționată în farmacie sau magazine medicale.

ATENȚIE

Înainte de a utiliza produsul, este foarte necesar să vă asigurați că toate curelele, precum și echipamentele de siguranță sunt fixate corect și ajustate. Mai mult, verificați dacă acestea nu se desfac din cauza presiunii și, în plus, asigurați-vă că clemele din elementele reglabile sunt strânse ferm!

Echipamentul funcționează corect numai atunci când dispozitivul este reglat în funcție de înălțimea și greutatea utilizatorului. Nu uitați să luați în considerare toate aceste măsurători în timpul achiziționării produsului. Ajustarea corectă este cea mai importantă datorită faptului că numai atunci produsul este sigur. Este interzisă forțarea copilului să păstreze o anumită poziție, deoarece se va simți inconfortabil și poate duce la o poziție greșită.

Reglarea incorectă a dispozitivului poate duce la efecte secundare, cum ar fi: leșin, deformări ale corpului, supraîncălcarea articulațiilor. Este foarte recomandabil să reglați dispozitivul înainte de fiecare utilizare a unui cadru în picioare. Această ajustare trebuie făcută numai de o persoană instruită sau de un terapeut. Dacă apar oricare dintre aceste reacții adverse, este foarte important să opriți procesul de poziție verticală, să scoateți utilizatorul din dispozitiv și să-l așezați. Dacă aceste efecte secundare nedorite apar în continuare, este necesar să contactați medicul. Dacă aceste reacții adverse au dispărut, nu uitați să informați medicul pentru a lua o decizie cu privire la continuarea procesului de reabilitare. Numai medicul poate lua o decizie cu privire la utilizarea scaunului de reabilitare!

7.3 CUM SE UTILIZEAZĂ VESTA

ATENȚIE

Vesta oferă suport pentru postură pentru utilizatorii de scaune cu roțile, precum și pentru utilizatorii care stau în scaune de poziționare sau alte scaune de reabilitare. Atunci când este utilizată în mod corespunzător, vesta permite utilizatorului să adopte poziția corectă de ședere pentru o perioadă mai lungă de timp. Designul și forma vestei permit utilizatorului să fie liber să-și miște membrele superioare în limitele impuse de utilizator.

Dacă vesta nu este utilizată în mod corespunzător, aceasta poate reprezenta o amenințare gravă la adresa sănătății și vieții utilizatorului!

Posibile riscuri de incidente în legătură cu utilizării vestei:

- 1) **În cazul în care curelele inferioare ale vestei sunt fixate prea lejer, există riscul ca vesta să se deplaseze în sus până la gâtul utilizatorului, ceea ce face dificilă respirația – verificați întotdeauna tensiunea curelelor și fixațiile astfel încât marginea inferioară a vestei să fie situată în apropierea abdomenului inferior al utilizatorului.**
- 2) **Într-o situație în care utilizatorul alunecă de pe scaun, marginea superioară a capacului vestei este gâtul utilizatorului și blochează traheea, ceea ce face dificilă respirația – prin urmare,** este necesar să se utilizeze ÎNTOTDEAUNA accesoriile care stabilizează pelvisul utilizatorului, cum ar fi o centură pelviană, centuri de răpire a coapsei sau un bloc de răpire.
- 3) **Există riscul ca curelele superioare ale vestei să apese gâtul utilizatorului, blocând traheea și făcând dificilă respirația. Acest lucru se poate întâmpla în cazul în care corpul utilizatorului este fixat în mod necorespunzător în scaun sau cărucior – atunci este necesar să se utilizeze accesoriile opționale ale acestor dispozitive și să se stabilizeze corpul utilizatorului utilizând suporturile laterale. Dacă nu există posibilitatea de a utiliza astfel de accesorii cu dispozitivul și corpul utilizatorului nu poate fi stabilizat în mod corespunzător, dispozitivul trebuie înlocuit cu cel care are o astfel de opțiune.**
- 4) **Vesta este fixată prea strâns de spătar și, prin urmare, utilizatorul nu poate respira ușor –** în acest caz, vesta trebuie slăbită astfel încât îngrijitorul să poată introduce o mână îndreptată între vestă și corpul utilizatorului. Dacă, totuși, dorim să stabilizăm corpul utilizatorului în mod corespunzător, ar trebui să folosim o vestă ortopedică dinamică, de exemplu o vestă Flex-point, care nu provoacă dificultăți de respirație pentru utilizator.

Instrucțiuni pentru utilizarea corectă a vestei:

- 1) Asigurați-vă că utilizatorul se află în cea mai bună poziție posibilă:
 - în mijlocul scaunului,
 - adânc în scaun, astfel încât coloana lombară a utilizatorului să se sprijine pe spătar.
- 2) Fixați pelvisul utilizatorului cu, de exemplu, o centură pelviană, centuri de răpire

a coapsei sau un bloc de răpire.

- 3) Asigurați-vă că suporturile laterale ale dispozitivului, dacă sunt utilizate, sunt așezate în poziția corectă. Este necesar ca utilizatorii cu control slab al portbagajului să utilizeze suporturile laterale. Suporturile laterale limitează mișcările laterale ale corpului utilizatorului, ceea ce ar putea duce la comprimarea curelelor vestei pe gâtul utilizatorului.
- 4) Securizați vesta:
 - fixați și reglați curelele inferioare ale vestei, astfel încât marginea inferioară a vestei să fie situată în apropierea abdomenului inferior al utilizatorului;
 - să fixați cureaua orizontală a vestei (dacă este cazul);
 - fixați curelele de umăr ale vestei,
 - verificați dacă cataramele vestei nu se deschid sub presiune.
- 5) Verificați poziția utilizatorului:
 - să se asigure că vesta nu se poate deplasa singură spre gâtul utilizatorului;
 - Asigurați-vă că puteți introduce o mână îndreptată între vestă și corpul utilizatorului.

Pentru a preveni răniile și pentru a minimiza riscurile asociate cu utilizarea vestei, trebuie respectate următoarele reguli:

- 1) Poziția vestei TREBUIE verificată de fiecare dată după așezarea utilizatorului pe scaun.
- 2) O atenție deosebită trebuie acordată protejării utilizatorului împotriva căderii în față, alunecării de pe scaun sau ridicării pelvisului. Vesta TREBUIE să fie utilizată cu accesoriile care vor fixa pelvisul utilizatorului în orice moment (de exemplu, centura pelviană, centurile de răpire a coapsei sau blocul de răpire). Utilizarea vestei nu poate fi luată în considerare separat, ci ca parte a unui sistem general de susținere a posturii, care include suporturi precum centurile pelviene, suportul pentru picioare, stabilizarea trunchiului, centurile de răpire a coapsei, poziția de înclinare în spațiu și spătarul înclinat.
- 3) O atenție deosebită trebuie acordată asigurării faptului că întregul picior al pacientului are un sprijin stabil. Dacă dispozitivul nu este echipat cu un suport pentru picioare, picioarele utilizatorului trebuie să se sprijine ferm pe sol.
- 4) Trebuie reținut faptul că orice schimbare a unghiului de înclinare a spătarului, a scaunului, a suportului pentru picioare sau a funcției de înclinare în spațiu ar putea afecta eficacitatea centurilor și a suporturilor!
- 5) O atenție deosebită trebuie acordată utilizării elementelor de stabilizare sau a suporturilor laterale. Dacă utilizatorul are un control slab al trunchiului, suporturile laterale vor limita mișcările laterale, ceea ce ar putea duce la comprimarea curelelor vestei pe gâtul utilizatorului.

- 6) Montarea vestei și ajustarea acesteia la pacient poate fi efectuată numai de o persoană instruită corespunzător, care este familiarizată cu instrucțiunile de utilizare a vestei și cu regulile de utilizare în condiții de siguranță.
- 7) Nu faceți nici o reparație sau modificare a vestei pe cont propriu. Pentru a repara sau înlocui orice parte a vestei, vă rugăm să contactați producătorul.
- 8) Nu utilizați o vestă deteriorată sau incompletă, deoarece aceasta reprezintă o amenințare gravă pentru sănătatea și viața utilizatorului!
- 9) Nu lăsați utilizatorul în dispozitiv nesupravegheat!
- 10) Corectitudinea utilizării vestei trebuie controlată în special în conformitate cu recomandările în cazul copiilor, utilizatorilor cu deficiențe de memorie sau bolnavi mintal.
- 11) Asigurați-vă că toate persoanele care au grijă de utilizator sunt familiarizate cu regulile de utilizare în condiții de siguranță a vestei.

Îngrijirea vestei:

Vesta funcționează eficient numai dacă este păstrată curată și întreținută în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Înainte de fiecare utilizare a vestei, verificați dacă:

1. Curelele de la vestă nu sunt rupte sau purtate. Dacă da, schimbați-le cu altele noi.
2. Curelele de la vestă nu sunt atașate de dispozitiv.
3. Cataramele nu sunt deteriorate. Dacă da, schimbați-le cu altele noi.
4. Fixarea Velcro se menține ferm. Dacă nu, îndepărtați orice murdărie sau păr de pe Velcro sau înlocuiți-l cu unul nou.
5. Nu au existat modificări ale înălțimii sau greutateii pacientului din momentul în care vesta a fost ajustată la utilizator.
6. Curelele de umăr ale vestei sunt reglate astfel încât să nu fie prea libere sau prea strânse.
7. Vesta trebuie curățată în mod regulat cu apă caldă cu săpun și uscată din lumina directă a soarelui și din alte surse de căldură. Vesta trebuie să fie întotdeauna uscată înainte de utilizare.

Dacă aveți îndoieli sau întrebări cu privire la utilizarea vestei, vă rugăm să contactați medicul dumneavoastră sau fizioterapeutul.

8. NORME DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE

Scaunul JORDI™ trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare.

Este foarte important să consultați medicul sau fizioterapeutul pentru a lua o decizie corectă în ceea ce privește alegerea scaunului și dimensiunea acestuia. De asemenea, este esențial să vă familiarizați cu instrucțiunile descrise în manualul de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul.

1. Înainte de utilizare, este necesar să:

- să se asigure că nu există daune sau defecte diferite care ar putea pune în pericol viața utilizatorului; verifică dacă toate piesele funcționează și sunt montate corect și, în plus, verifică dacă nu sunt rupte;
- verificați dacă toate șuruburile, butoanele și toate părțile lipite, cusute sau filetate sunt strânse;
- verifică dacă frânele funcționează corect;
- verificați dacă cataramele funcționează corect;
- utilizați întotdeauna centuri de siguranță, benzi Velcro ar trebui să se suprapună min. 8cm,
- reglarea dispozitivului în funcție de măsurătorile și nevoile utilizatorului, de exemplu reglarea pelotelor, a plăcuței pentru picioare etc.
- asigurați-vă că toate piesele mobile și butoanele pentru reglaje sunt stabile și blocate;
- securizarea utilizatorului cu ajutorul unor elemente precum vesta, centurile de stabilizare a piciorului, pelotele, blocul de răpire, tetiera. Este foarte important să securizați utilizatorul, deoarece îl protejează de cădere. Dacă apare contractura de răpire, se recomandă utilizarea blocului de răpire pentru a preveni ulcerul între genunchi.

1. Este interzisă utilizarea scaunului în alte scopuri decât cele prevăzute.
2. Este interzisă utilizarea scaunului atunci când acesta este deteriorat sau orice parte lipsește.
3. Este interzis să lăsați utilizatorul nesupravegheat.
4. Scaun ar trebui să fie utilizat numai atunci când există cineva care este instruit și cunoscător.
5. Este interzisă lăsarea nesupravegheată a scaunului și a utilizatorului pe teren instabil, chiar dacă frâna este cuplată.
6. Este interzis să urcați sau să coborâți scările; nu contează dacă utilizatorul este plasat în dispozitiv sau nu.
7. Este important să vă asigurați că utilizatorul nu se află în subsol în timpul urcării sau coborârii de pe scaun.
8. Este important să acționați frâna în timpul urcării și coborârii de pe scaun.
9. Asigurați-vă că toate membrele nu sunt aproape de spițe sau alte elemente

reglabile.

10. Vă rugăm să acordați atenție atunci când vă apropiați de surse de foc sau de surse de temperatură ridicată în timpul utilizării dispozitivului. Mai mult decât atât, scaunul nu ar trebui să fie depozitat în camere cu umiditate ridicată.
11. Securizați scaunul în timpul transportului pentru a evita orice posibile daune. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele care au apărut din cauza pregătirii necorespunzătoare a dispozitivului în timpul transportului.
12. Înainte de a utiliza scaunul, îndepărtați toate ambalajele din hârtie și plastic. Ambalajul nu este o jucărie! Stai departe de copii și animale.

ATENȚIE

Ajustarea incorectă a produsului poate duce la efecte secundare cum ar fi leșinul, deformările corporale, supraîncărcarea articulațiilor etc. Dacă apar simptomele menționate mai sus, opriți imediat utilizarea produsului, scoateți utilizatorul din produs și așezați-le. Dacă simptomele nedorite persistă, contactați imediat un medic. Dacă simptomele au dispărut, informați medicul curant despre acest fapt pentru a lua o decizie cu privire la procesul de reabilitare ulterioară.

Incidentele grave care implică acest dispozitiv trebuie raportate atât producătorului, cât și autorității competente din țara dumneavoastră.

Acest dispozitiv poate fi utilizat numai în interiorul clădirilor.

Produsul conține părți mici pe care copiii le pot înghiți.

Nu utilizați un produs care prezintă semne de deteriorare, rupere sau uzură. Numai un produs nedeteriorat și o utilizare adecvată garantează funcționarea corectă și sigură a acestuia. Dacă produsul este deteriorat, întrerupeți utilizarea și contactați producătorul.

În nici un caz, o persoană necalificată nu ar trebui să repare sau să modifice produsul și construcția acestuia, deoarece sănătatea și siguranța utilizatorului depind de acesta, precum și va duce la pierderea garanției.

Amintiți-vă că toate încărcăturile atârinate pe mânerul de împingere pot provoca pierderea echilibrului dispozitivului.

Greutatea utilizatorului nu trebuie să fie mai mare decât greutatea maximă descrisă la pagina 7, unde veți găsi informații cu privire la această problemă.

9. TERMENI DE GARANȚIE

- 1) **Akces-MED Ltd.** vinde produse fără defecte de fabricație sau defecte.
- 2) Producătorul oferă cumpărătorului o garanție de 24 de luni de la data achiziționării. Toate defectele descoperite în timpul perioadei de garanție vor fi reparate gratuit.

- 3) Toate defectele care apar după perioada de garanție pot fi reparate numai atunci când utilizatorul va plăti pentru aceasta. Această regulă nu se aplică produselor rambursate - utilizatorul poate solicita rambursarea National Health Refund.
- 4) Producătorul susține că produsul poate fi utilizat timp de 48 de luni. Utilizatorul poate utiliza acest produs după această perioadă numai atunci când va trimite dispozitivul producătorului pentru a-l întreține. Apoi, producătorul determină din nou cât timp poate fi utilizat produsul și, în plus, va fi determinată data următorului serviciu.
- 5) Dacă produsul este deteriorat, vă rugăm să contactați distribuitorul nostru sau serviciul pentru clienți Akces-MED Ltd.: (tel. + 48 17 864 04 77, e-mail: export@akces-med.com)

10. ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Scaunul JORDI™ trebuie păstrat curat și utilizat în conformitate cu recomandările producătorului. Dispozitivul trebuie păstrat într-o cameră curată, uscată și ventilată. Întreținerea și curățarea trebuie efectuate cel puțin o dată pe lună. Curățarea și întreținerea regulată a scaunului sunt indispensabile pentru a menține funcționalitatea corectă, precum și siguranța.

Recomandări pentru curățarea tapițeriei și a altor elemente ale scaunului:

1. Spălați cu apă caldă folosind o cârpă moale și produse de curățare ușoare.
2. Asigurați-vă că cârpa nu este prea umedă, deoarece acest lucru poate mări pata și poate deteriora tapițeria sau spuma din interiorul tapițeriei.
3. Amintiți-vă să eliminați excesul de umiditate din tapițerie înainte de următoarea curățare.
4. După curățarea petelor, tapițeria trebuie clătită cu apă caldă și uscată cu o cârpă curată.
5. Nu trebuie să înmuiati tapițeria.
6. Tapițeria nu trebuie să se ude în timpul curățării.
7. Nu folosiți perii dure pentru curățarea tapițeriei.
8. Nu curățați tapițeria cu substanțe chimice puternice, de exemplu solvenți sau caustice pe bază de clor.
9. Nu curățați, nu înlocuiți elementele și nu întrețineți scaunul în timpul utilizării.
10. Elementele metalice și plastice trebuie curățate manual cu agenți de curățare adecvați, după ce ați citit recomandările producătorului agentului de curățare dat.
11. Este posibil să dezinfecțați elementele de metal, plastic, lemn și tapițerie ale produsului cu un dezinfectant general disponibil. Pentru a dezinfecța elementul

selectat, pulverizați suprafața acestuia cu un dezinfectant disponibil în general pe piață și ștergeți cu o cârpă uscată și curată. După dezinfecție, așteptați până când elementul este complet uscat, în special în cazul tapițeriei. Înainte de a utiliza dezinfectantul, verificați mai întâi într-un loc invizibil dacă produsul nu va decolora sau deteriora suprafața dezinfectată.

ATENȚIE

Amintiți-vă că tapițeria trebuie să fie întotdeauna uscată înainte de utilizare!

Producătorul scaunului, Akces-MED Ltd., nu este responsabil pentru orice daune cauzate de utilizarea detergenților nepotriviiți.

Înainte de utilizare, este necesar să:

- roți curate,
- verificați dacă baza și roțile sunt montate corect; verificați dacă frâna oprește roata de întoarcere;
- verificați dacă construcția scaunului nu prezintă rupturi sau alte tipuri de deformări;
- verificați dacă toate piesele mobile funcționează și dacă toate șuruburile, piulițele, butoanele etc. sunt strânse corect
- verificați dacă centurile, vestele, centurile portbagajului, centurile de stabilizare a picioarelor etc. nu sunt rupte; verificați dacă cataramele și clemele funcționează corect.

ATENȚIE

Producătorul își asumă responsabilitatea numai pentru defecțiunile sau daunele ascunse care au apărut în ciuda faptului că utilizatorul a respectat liniile directoare.

În caz de daune, este esențial să contactați persoana care v-a vândut produsul.



INSPECȚIA TEHNICĂ

Inspecțiile tehnice ar trebui efectuate în mod regulat. Înainte de întreținere, produsul trebuie curățat temeinic pentru a dezvălui orice deteriorare ascunsă.

Frecvență	Ce ar trebui verificat? Ce ar trebui făcut?		Observații
Înainte de fiecare utilizare	Condiția generală a produsului	Verificați: • întregul produs pentru eventuale deteriorări vizibile, fisuri sau defecte mecanice, • dacă produsul este complet, • dacă toate șuruburile, bolțurile, butoanele, piulițele și celelalte elemente ale construcției sunt complete și bine strânse.	În caz de deteriorări sau defecte, opriți imediat utilizarea produsului și contactați Furnizorul/Distribuitorul dumneavoastră sau Producătorul.
	Roți și frâne	Verificați: • dacă roțile sunt montate corect și nu sunt deteriorate, • dacă frâna blochează roata la rotire, • dacă roțile nu sunt murdare. Dacă este necesar, curățați roțile.	În caz de deteriorări sau defecte, opriți imediat utilizarea produsului și contactați Furnizorul/Distribuitorul dumneavoastră sau Producătorul.
	Fixarea elementelor de construcție.	Verificați toate mecanismele produsului și piesele sale mobile. Verificați în special: • dacă șezutul este montat corect (dacă este cazul), • dacă roțile sunt montate corect (dacă este cazul), • dacă elementele de fixare a utilizatorului sunt montate corect și funcționează bine (dacă	În caz de deteriorări sau defecte, opriți imediat utilizarea produsului și contactați Furnizorul/Distribuitorul dumneavoastră sau Producătorul.


		este cazul), • dacă toate piesele mobile sunt complete, funcționează corect și nu se blochează, • dacă mecanismele de reglare ale următoarelor elemente funcționează corespunzător (dacă este cazul): tetieră, spătar, șezut, bloc de abducție, cotiere, suporturi pentru picioare.	
	Elemente de tapițerie	Verificați: • dacă există deteriorări, rupturi, desfășurări de cusături sau deformări ale elementelor de tapițerie, • dacă centurile de stabilizare, vestele sau centurile de siguranță nu sunt tocite sau răsucite și dacă cataramele funcționează corect, • dacă centurile de stabilizare, vestele sau centurile de siguranță funcționează corespunzător și nu se deschid sub presiune sau la tragere.	În caz de deteriorări sau defecte, opriți imediat utilizarea produsului și contactați Furnizorul/Distribuitorul dumneavoastră sau Producătorul.
O dată pe săptămână	Curățarea produsului	Dacă cadrul și elementele de tapițerie se murdăresc (praf, noroi etc.) în timpul utilizării zilnice, ștergeți-le cu o cârpă umedă, fără detergenți. Îndepărtați murdăria (de exemplu, păr,	Produsul trebuie curățat atunci când este necesar, dar cel puțin o dată pe săptămână. Nu utilizați detergenți pe bază de clor sau alcool metilat. Înainte de a folosi produsul, verificați dacă elementele de tapițerie sunt uscate.

		resturi de alimente etc.) de pe piesele mobile ale produsului.	
O dată pe lună	Axe roți, conectori rapizi (dacă este cazul).	Verificați: • dacă roțile se învârt și dacă nu sunt slăbite. Pentru întreținerea roților, aplicați o cantitate mică de lubrifianț între ax și butucul roții. Verificați dacă roțile se pot monta și demonta cu ușurință.	Curățați roțile atunci când sunt murdare. În caz de deteriorări sau defecte, opriți imediat utilizarea produsului și contactați Furnizorul/Distribuitorul sau Producătorul.
	Construcții de produse – (sudură, filetare, lipire)	Verificați: starea cadrului produsului în locurile de îmbinare (suduri, fire, lipire).	În cazul oricăror deteriorări sau defecte, întrerupeți utilizarea produsului și contactați Furnizorul / Distribuitorul sau Producătorul.
	Anvelope/inner tubes (dacă e aplicabil).	Verificați: Starea de uzură a anvelopei. Verificați dacă există deteriorări vizibile. Verificați presiunea în pneuri (dacă este cazul).	Dacă presiunea în anvelope este prea mică, umflați-le la nivelul corect. În cazul oricăror deteriorări sau defecte, întrerupeți utilizarea produsului și contactați Furnizorul / Distribuitorul sau Producătorul.
O dată la fiecare 6 luni	Construcția pieselor mobile.	Verificați: dacă părțile mobile ale construcției nu au fost deteriorate. Mențineți-le folosind un agent de curățare adecvat.	În cazul oricăror deteriorări sau defecte, întrerupeți utilizarea produsului și contactați Furnizorul / Distribuitorul sau Producătorul.
	Etichetarea produsul	• dacă marcajele și etichetele sunt lizibile.	În caz de deteriorări sau defecte, opriți imediat utilizarea produsului și contactați Furnizorul/Distribuitorul sau Producătorul.
După terminarea duratei de	Verificarea detaliată a produsului.	Verificați produsul.	Producătorul specifică durata de viață a produsului, care este dată în manualul

viață a produsului.			de utilizare. După perioada dată, utilizatorul poate utiliza produsul numai dacă acesta este trimis înapoi producătorului pentru a fi verificat mai întâi. După aceea, producătorul va redefini durata de viață a produsului și data următoarei verificări.
---------------------	--	--	---

11. ETICHETARE

11.1 SIMBOLURI

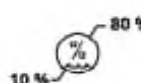	Declarație că produsul îndeplinește cerințele esențiale		Uscați vertical
	Nr. serie		Nu folosiți clor
	Vă rugăm, citiți manualul de utilizare înainte de utilizare		Nu călcați
	Atenție		Nu folosiți curățare chimică
	Producător		Nu folosiți înălbitor
	Data de fabricație		Conținut delicat, fragil
	Produsul nu conține latex		Nr. catalog
	A se depozita în loc uscat		Limitare privind umiditatea relativă de depozitare
	A se proteja de lumina soarelui		Este interzis atât să urci, cât și să cobori scările. Nu contează dacă utilizatorul este plasat în dispozitiv sau

			nu
	A se depozita în intervalul de temperatură		Este interzis să lăsați utilizatorul nesupravegheat în timpul utilizării produsului.
	Produs medical		Este interzisă utilizarea fără centurile de siguranță fixate
	Trebuie să citiți informațiile suplimentare		Trebuie să citiți informațiile suplimentare
	Trebuie să folosiți instrumentele din kit-ul de montare		

11.2 PLACĂ DE IDENTIFICARE/PROBĂ.

COD QR CU LINK către Website-ul produsului

ADRESA PRODUCATORULUI

FABRICAT LA DATA DE

DENUMIREA PRODUSULUI PL

DENUMIREA PRODUSULUI EN

COD DE BARE

ETICHETARE vezi greutatea max admisă pentru acest produs

NR. SERIE

NR. SERIE ȘI CODUL DE BARE

AKCESMED
www.akces-med.com

JORDI 2
Fotelik ortopedyczno-rehabilitacyjny ze stabilizacją pleców i głowy
JORDI 2
POSITIONING CHAIR

AKCES-MED Sp. z o.o.
Jasionka 8566
38-002 JASIONKA
POLAND

MAX LOAD: 65 kg

08.2022

MD

CE

5 900516 505211

JRI 007/P/2/BB

Producător



Akces-MED Ltd.

Jasionka 955 B

36-002 Jasionka

tel. +48 17 864 04 7

e-mail: export@akces-med.com

BDO: 000031619



akces-med.com

Data emiterii: 01.03.2016

Ultima actualizare: 13.03.2023